

Oplaadmogelijkheden voor ReSound hoortoestellen

ReSound biedt oplaadbare oplossingen met inductief opladen en een dag lang batterijgebruik zodat uw klanten altijd actief kunnen blijven.



Premium charger



Standaard charger



Desktop charger




Custom charger

ReSound Nexia™ microRIE		8	8	8	-
ReSound OMNIA™ miniRIE		6	6	6	-
ReSound OMNIA™ Std RIE		1	1	1	-
ReSound Nexia™ & ReSound OMNIA™ BTE		-	-	70	-
ReSound Nexia™ & ReSound OMNIA™ PBTE		-	-	80	-
ReSound Nexia™ & ReSound OMNIA™ ITE		-	-	-	C
ReSound LiNX Quattro™ & ReSound Key™ RIE		3	-	3	-

ReSound hoortoestellen koppelen aan de juiste oplader

Elk type oplader wordt aangeboden met verschillende inserts – bekend als de charging form factor (CFF) - die betrekking hebben op een specifieke ReSound-hoortoestelcollectie of -model.

De CFF wordt aangegeven met een nummer en wordt weergegeven in de lader en op de verpakking van de lader.

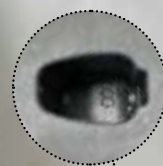

Nummer in oplader



Nummer op verpakking

CFF-nummers staan nog niet op alle charger verpakkingen. Raadpleeg het nummer in de charger:

- Bij ReSound OMNIA RIE Standard staat CFF 1 in de charger
- Bij ReSound Quattro RIE & ReSound Key RIE staat CFF 3 in de charger



KENMERKEN VAN DE OPLADER

	ReSound Nexia				ReSound OMNIA				ReSound LINX Quattro ReSound Key	
	Premium charger	Standaard charger	Desktop charger	Custom charger	Premium charger	Standaard charger	Desktop charger	Custom charger	Premium charger	Desktop charger
	microRIE	microRIE	microRIE/BTE/ Power BTE	Customs	miniRIE/RIE	miniRIE/RIE	miniRIE/RIE BTE/Power BTE	Customs	RIE	RIE
Inductief laden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Draagbaar met ingebouwde powerbank	•				•				•	
Draagbaar zonder powerbank		•		•		•		•		
USB-C-aansluiting en -kabel	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LED achteraan	Geeft de batterijstatus weer van de powerbank	Licht op wanneer de lader is aangesloten op de netvoeding	Geeft aan wanneer de lader is aangesloten op een voedingsbron	Geeft aan wanneer de lader is aangesloten op een voedingsbron	Geeft de batterijstatus weer van de powerbank	Licht op wanneer de lader is aangesloten op de netvoeding	Geeft aan wanneer de lader is aangesloten op een voedingsbron	Geeft aan wanneer de lader is aangesloten op een voedingsbron	Geeft de batterijstatus weer van de powerbank	Geeft aan wanneer de lader is aangesloten op een voedingsbron
LED aan de voorkant	Toont het opladen van de hoortoestellen			Toont het opladen van de hoortoestellen	Toont het opladen van de hoortoestellen			Toont het opladen van de hoortoestellen	Toont het opladen van de hoortoestellen	

HOE WEET U OF DE HOORTOESTELLEN OPLADEN?

Plaats de hoortoestellen in de oplader en let op de lampjes op de hoortoestellen. Het proces is hetzelfde voor elke oplader.

U weet dat het opladen is begonnen als de lampjes van het hoortoestel langzaam beginnen te knippen.

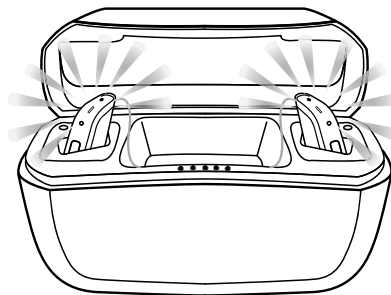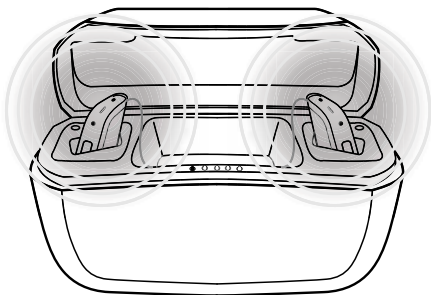

Als het hoortoestel volledig is opgeladen, blijft het lampje constant branden en knippert het niet meer.

De lampjes gaan uit als u de hoortoestellen uit de oplader haalt.

Premium charger afgebeeld.

Raadpleeg de individuele gebruikershandleiding van elke oplader voor meer informatie.

Internationaal hoofdkantoor
GN Hearing A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denemarken
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

Nederland | België
GN ReSound Benelux B.V.
Florijnweg 25
6883 JN VELP
Nederland
Tel.: +263195000
resound.com

CVR-nr. 55082715